

METTLER TOLEDO
Bộ phận Phòng thí nghiệm



Cân LA

Sản phẩm cân Đơn giản, Đáng tin cậy

METTLER TOLEDO

Sản phẩm cân Đơn giản, Đáng tin cậy

Tận dụng tối đa ngân sách của bạn với những sản phẩm cân sơ cấp, không chỉ đáp ứng được nhu cầu thực hiện các thao tác cân cơ bản, mà còn đảm bảo chất lượng và độ tin cậy đến từ METTLER TOLEDO.



Mọi điều Bạn Cần

- Sản phẩm cân đơn giản, chất lượng này là lựa chọn hoàn hảo để bạn thực hiện các thao tác cân đơn giản và thu được kết quả chính xác, đáng tin cậy.

Hiệu suất Đáng tin cậy

- Với chất lượng được đảm bảo, cảm biến tải trọng chính xác mang lại kết quả nhanh chóng, đáng tin cậy.

Chất lượng tốt, Giá phải chăng

- Bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng của các sản phẩm METTLER TOLEDO để thu được hiệu suất đáng tin cậy và tuổi thọ cân lâu dài, đảm bảo chi phí sở hữu tổng thể ở mức thấp.

Với Tất cả các Chức năng Cơ bản mà Bạn Cần

Chống Quá tải

Bảo vệ cân khỏi tải nặng

Hiệu chỉnh Nội

Khả năng hiệu chỉnh tích hợp bằng quả cân hiệu chuẩn nội

Màn hình LCD

Số hiển thị lớn và sáng nên rất dễ đọc

Kích thước Nhỏ

Để sử dụng không gian hiệu quả

Giao diện kết nối RS232

Kết nối máy in, màn hình hiển thị thứ hai hoặc các thiết bị khác

Khóa các Chế độ cài đặt

Bảo vệ các chế độ cài đặt của cân khỏi những thay đổi ngẫu nhiên



Hiệu suất Đáng tin cậy

Cấu tạo Bền cho Giá trị Lâu dài

- Với **cấu tạo vững chắc** và vật liệu chất lượng cao, những sản phẩm cân này có **tuổi thọ lâu dài**, giúp bạn yên tâm rằng cân sẽ cho kết quả chính xác trong nhiều năm tới.
- Tính năng **chống quá tải tích hợp giúp** bảo vệ cảm biến cân khỏi tải quá nặng. Với chất lượng được đảm bảo, **cảm biến tải trọng chính xác** mang lại kết quả nhanh chóng, đáng tin cậy.
- **Nắp bảo vệ** được trang bị theo tiêu chuẩn để bảo vệ cân khỏi bụi, chất bẩn và hoá chất mạnh.
- Có thể sử dụng **khả năng điều chỉnh tích hợp sẵn** bằng các quả cân chuẩn nội bộ mà chỉ cần nhấn một phím. Dễ dàng xác nhận mức cân bằng của cân dựa vào giọt nước cân bằng ở mặt trước.

Cân có cấu tạo chắc chắn cho thời gian sử dụng lâu dài, mang lại kết quả chính xác và đáng tin cậy



Đơn giản và Giá phải chăng

Với Tất cả các Chức năng Cơ bản mà Bạn Cần

- **Màn hình LCD sáng** hiển thị số với kích thước lớn giúp dễ đọc kết quả, đồng thời mang lại khả năng truy cập nhanh và dễ dàng vào các ứng dụng cũng như quy trình điều chỉnh.
- Ngoài việc cân đơn giản, **các ứng dụng được tích hợp sẵn** để đếm đơn vị và khả năng cân động cũng được thiết kế sẵn sàng cùng chức năng **tính toán kết quả tự động** để giảm bớt lỗi.
- **Tính năng khoá cài đặt** cho phép khoá chế độ cài đặt của cân để ngăn chặn những thay đổi ngẫu nhiên, đảm bảo tất cả người vận hành sử dụng cùng một chế độ cài đặt để duy trì tính nhất quán giữa các tác vụ cân.
- **Giao diện RS232** cho phép bạn kết nối máy in, màn hình phụ hoặc các thiết bị khác với cân. Kết nối với PC để truyền dữ liệu cân nhanh chóng và không bị lỗi.



Với tất cả các chức năng cơ bản mà bạn cần



Máy in
Lập tài liệu không bị lỗi



Khóa điện tử Bluetooth
Truyền dữ liệu không dây



Màn hình Phụ
Màn hình LCD lớn có đèn nền



Quả cân Hiệu chuẩn CarePac®
Kiểm tra định kỳ đầy đủ



Cửa Bảo vệ Bên ngoài
Ổn định nhanh hơn




Cáp Chống Trộm
Bảo vệ khoản đầu tư của bạn



Nắp Bảo vệ
Giữ cho cân an toàn và sạch sẽ

GreenMT là Chương trình Trách nhiệm Doanh nghiệp và Phát triển Bền vững của chúng tôi

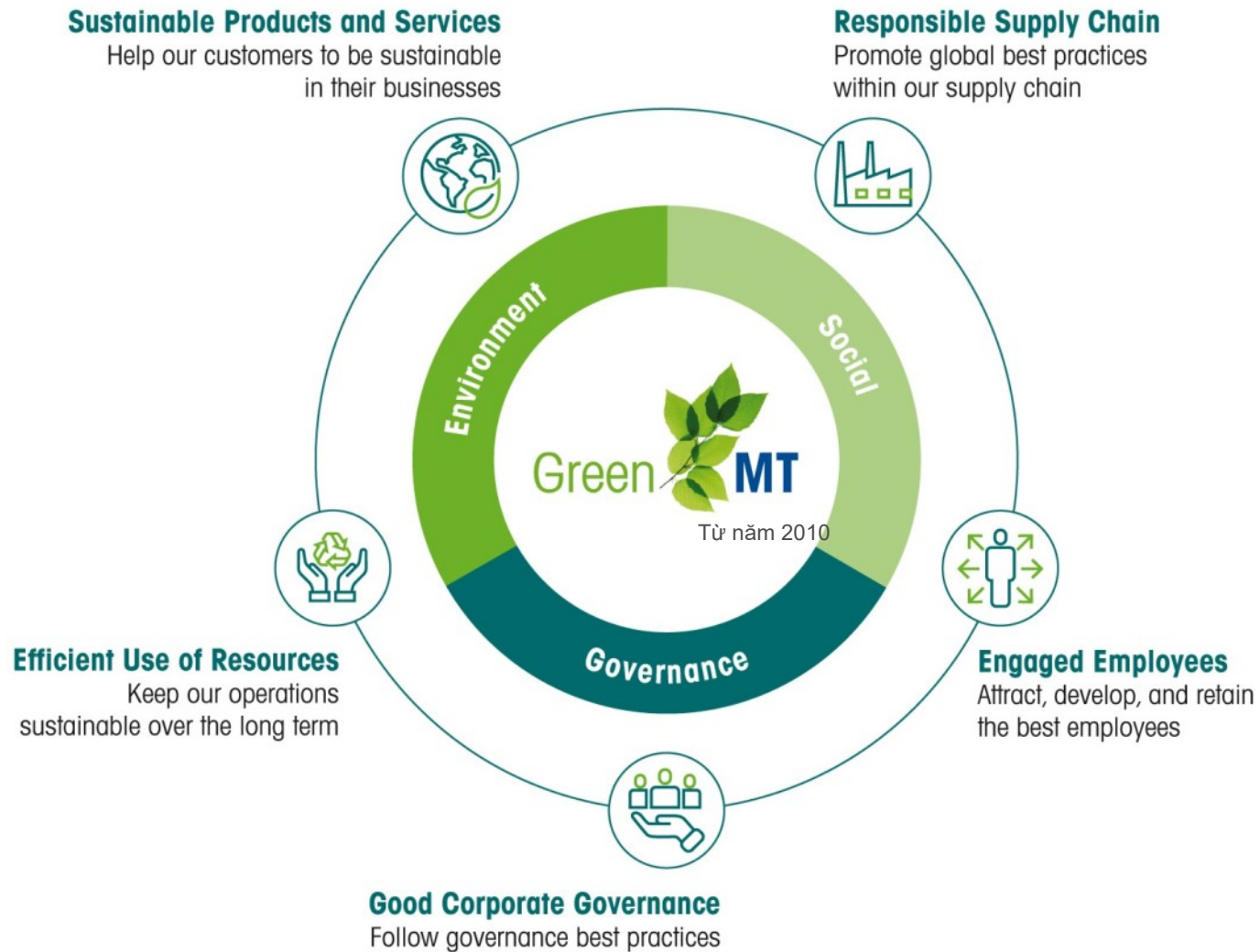

Vận hành trung
hoà carbon



100% Điện
Tái tạo



Không rác thải
năm 2025



Nguồn cung ứng
có Trách nhiệm



SCIENCE
BASED
TARGETS

Mục tiêu Net Zero
được Phê duyệt



Điểm Khí
hậu A-



Huy chương
bạc

Giải quyết các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc



Thông tin thêm tại www.mt.com/sustainability

Cân LA Bao gồm các Tính năng Cải thiện Tính bền vững



Chế độ Chờ

- Chế độ tiết kiệm năng lượng trong thời gian cân không hoạt động
- Tiết kiệm đến 30% năng lượng



Giảm Lãng phí

- Thiết kế bền giúp kéo dài tuổi thọ của dụng cụ
- Dễ sửa chữa nhờ có sẵn phụ tùng thay thế lâu dài



Bao bì Được cải thiện

- Giảm bao bì nhựa và xốp
- Phần xốp còn lại làm từ EPP có thể tái chế
- Sử dụng vật liệu tái chế, ví dụ như bột giấy và bìa cứng



Cộng sự Đáng tin cậy của Bạn về Cân trong Phòng thí nghiệm



Độ tin cậy và Tính chính xác

- Chuyên môn về cân trong nhiều thập niên đã được áp dụng vào mọi loại cân trong phòng thí nghiệm
- Cảm biến cân hiệu suất cao và các tính năng thông minh khác đảm bảo độ tin cậy, độ chính xác và hiệu quả





Khoản đầu tư Bền vững

- Các dụng cụ bền, chắc được chế tạo với khả năng hoạt động lâu dài
- Tổng chi phí sở hữu thấp
- Các giải pháp và giao diện phần mềm tương thích để hỗ trợ số hoá phòng thí nghiệm



Chuyên môn về Dịch vụ và Hỗ trợ

- Phân tích yêu cầu và đưa ra đề xuất
- Lắp đặt và đào tạo
- Hỗ trợ ứng dụng
- Dịch vụ hậu mãi: hiệu chuẩn, bảo trì dự phòng, sửa chữa

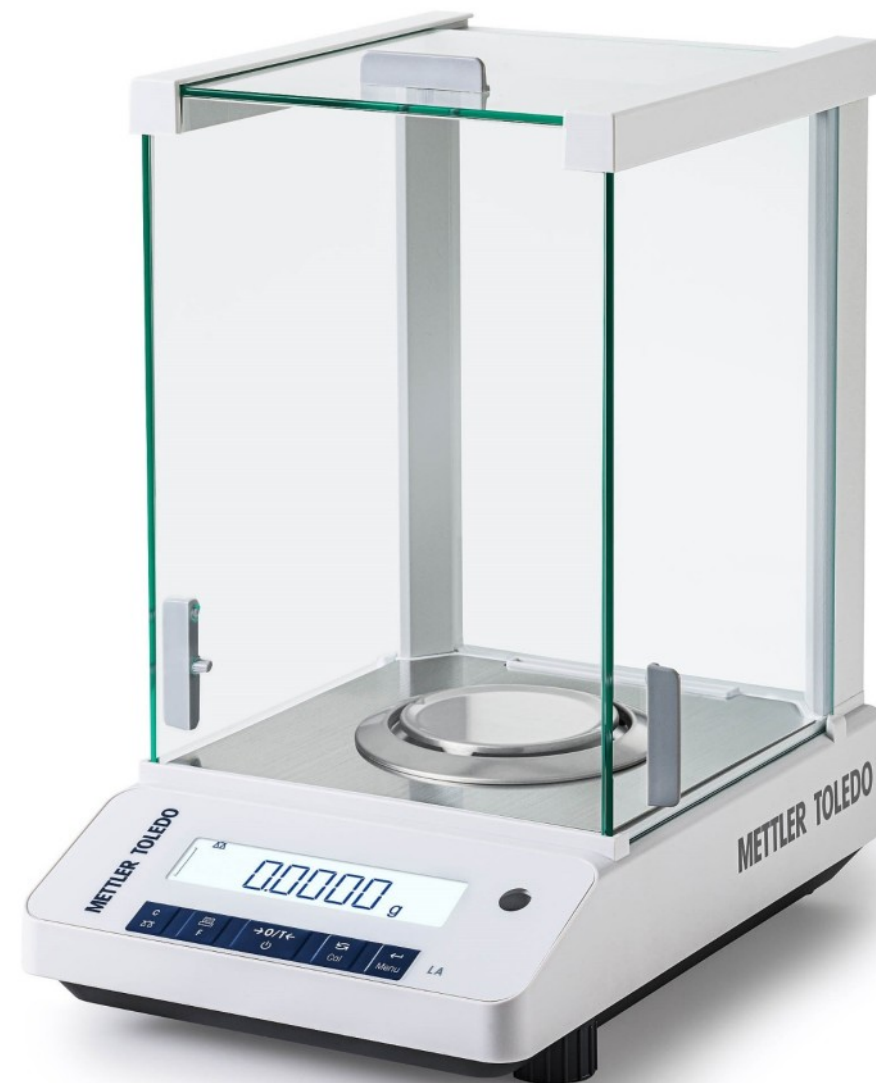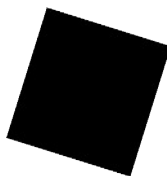

Thiết lập Đúng



- Thiết lập và cấu hình tùy chỉnh
- Hoạt động IQ/OQ và hỗ trợ PQ
- Kiểm tra chức năng và đào tạo người dùng cơ bản
- Lập tài liệu đáp ứng yêu cầu đánh giá
- Phù hợp với quy định của ngành

Các gói Lắp đặt

Kết quả Chính xác



- Định lượng hiệu suất của thiết bị (bao gồm cả độ không đảm bảo đo)
- Có nhiều phụ lục khác nhau để diễn giải kết quả hiệu chuẩn
- Chứng minh sự phù hợp với mục đích sử dụng bằng phụ lục Chứng nhận GWP®

Hiệu chuẩn ACC

Kiểm tra Định kỳ



- Cung cấp tần suất hiệu chuẩn dựa trên rủi ro và kế hoạch kiểm tra định kỳ
- Bao gồm tất cả các thông số kiểm tra (tần suất, phương pháp, trọng lượng và dung sai)
- Sản phẩm độc đáo của METTLER TOLEDO

GWP® Verification

Đảm bảo Thời gian vận hành



- Kiểm soát toàn bộ chi phí trong 24 tháng (bao gồm nhân công, phụ tùng và đi lại)
- Hai lần đến bảo trì dự phòng
- Kiểm tra hoạt động và kiểm tra chức năng, hiệu chỉnh nếu cần
- Liên hệ đường dây nóng kỹ thuật/can thiệp dịch vụ ưu tiên

ExtendedCare



	LA84	LA104	LA204	LA203	LA403	LA2002	LA4002
Công suất tối đa	82 g	120 g	220 g	220 g	420 g	2.220 g	4.200 g
Độ đọc	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg	1 mg	1 mg	10 mg	10 mg
Độ lặp lại, 5% tải	0,08 mg	0,08 mg	0,08 mg	0,7 mg	0,7 mg	7 mg	7 mg
Độ lệch tuyến tính	0,08 mg	0,08 mg	0,08 mg	0,6 mg	0,6 mg	6 mg	6 mg
Khối lượng cân tối thiểu (dung sai = 1%)*	16 mg	16 mg	16 mg	140 mg	140 mg	1,4 g	1,4 g
Khối lượng cân tối thiểu (USP, dung sai = 0,10%)*	160 mg	160 mg	160 mg	1,4 g	1,4 g	14 g	14 g
Thời gian ổn định	2,5 giây	2,5 giây	2,5 giây	2 giây	2 giây	1,5 giây	1,5 giây
Kích thước cân (R × S × C) (mm)	210 × 308 × 345	210 × 308 × 345	210 × 308 × 345	210 × 308 × 280	210 × 308 × 280	200 × 308 × 102	200 × 308 × 102
Đường kính đĩa cân (mm)	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 100	Ø 100	Ø 180	Ø 180

* Xác định ở mức tải 5%, k = 2